


Strumentario unico per entrambi gli approcci

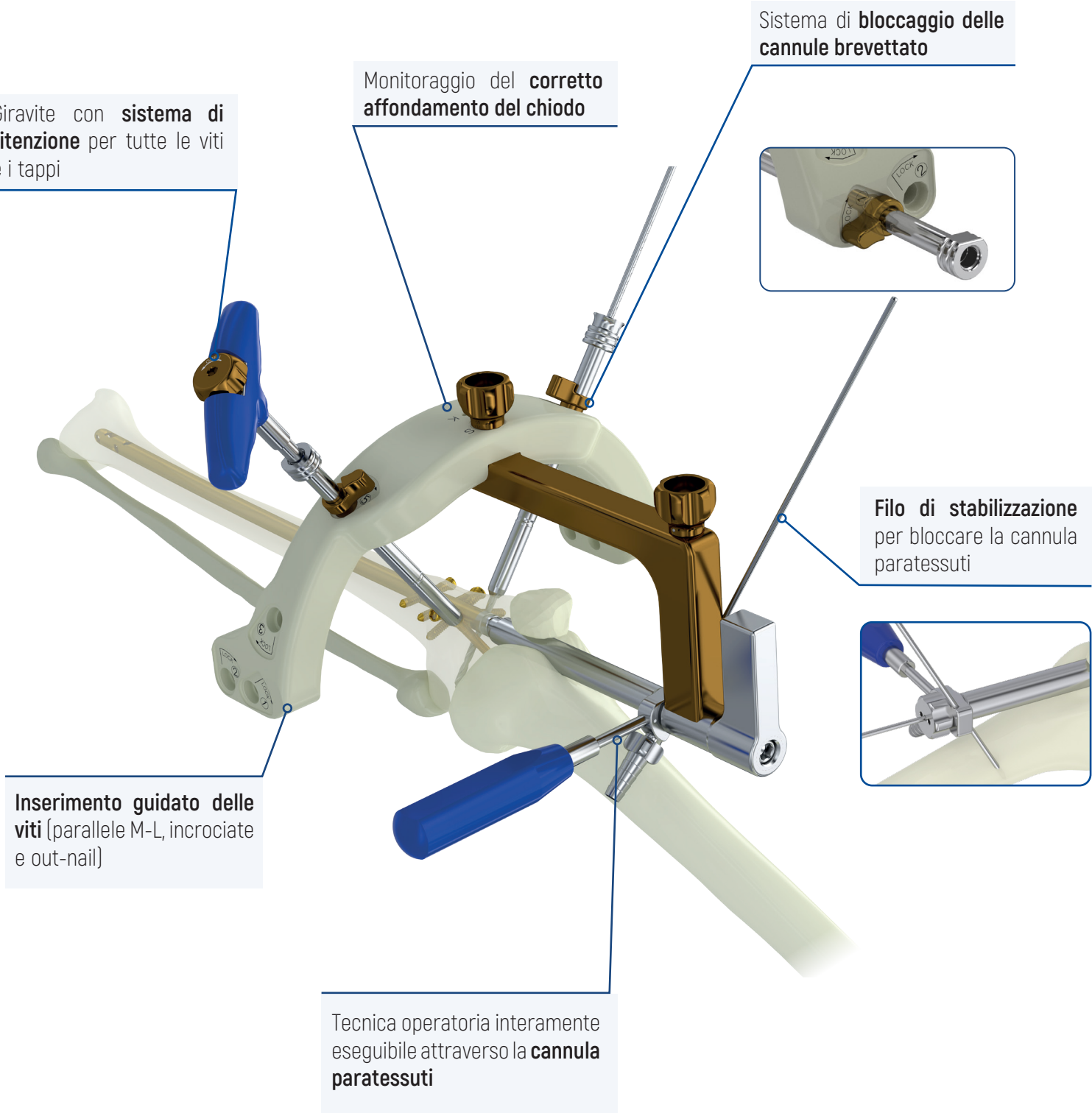

BR-003RAUT - Rev. 0 - 10/2025 - citieffe® si riserva di apportare modifiche senza preavviso

ESTREMO
CITIEFFE NAILING SYSTEM

Sistema di inchiodamento per tibia e femore

citieffe®
Essential moves in Trauma

Citieffe s.r.l.
Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy
Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870
info@citieffe.com - www.citieffe.com

INSPIRED BY PEOPLE
MOVED BY INNOVATION


ESTREMO
CITIEFFE NAILING SYSTEM

Sistema di inchiodamento per tibia e femore


- ✓ Design unico per l'approccio sovrarotuleo
- ✓ Approccio retrogrado di femore semplificato
- ✓ Molteplici opzioni di bloccaggio

APPROCCIO SOVRAROTULEO DI TIBIA

- ✓ **Tecnica operatoria interamente eseguibile attraverso la cannula paratessuti**
- ✓ **Curvatura anatomica del chiodo che ne facilita l'inserimento**

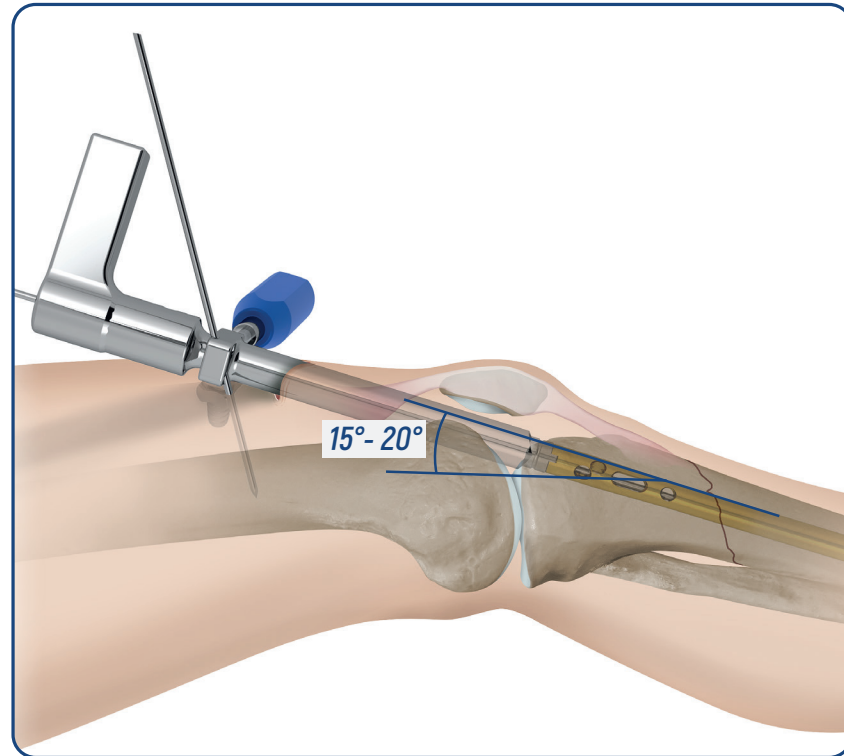

Molteplici opzioni di bloccaggio guidato

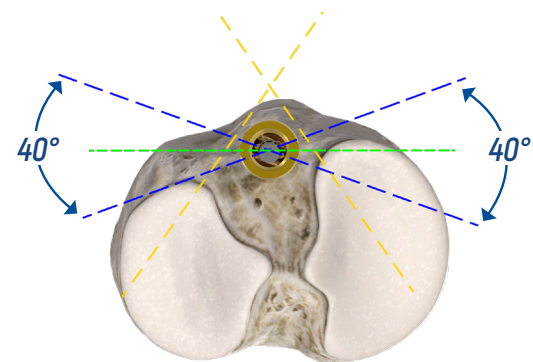

Bloccaggio prossimale multidirezionale

- 2 viti incrociate a 40°

- 2 viti parallele con accesso mediolaterale

Riduzione frammenti ossei del piatto tibiale

- 2 viti out-nail

Chiodo

- Lega di titanio ASTM F136
- Diametro chiodo solido: Ø8mm
- Diametro chiodo cannulato: Ø9, 10, 11, 12, 13mm
- Lunghezze disponibili: da 260 a 470mm con incrementi di 15mm


Viti



Vite da corticale Ø5.2mm



Vite da corticale Ø4mm (per il chiodo solido)

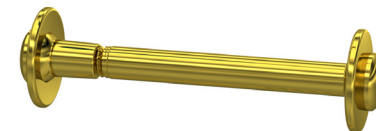

Vite condilare Ø5.2mm



Vite da spongiosa Ø5.2mm

Tre fori per bloccaggio statico

Asola per bloccaggio statico o dinamico


Asola per bloccaggio dinamico e compattazione intraoperatoria

Foro per bloccaggio statico

Alloggiamento per tappo


Due fori incrociati con angolo 40°

Sistema anti pull-out per le viti incrociate

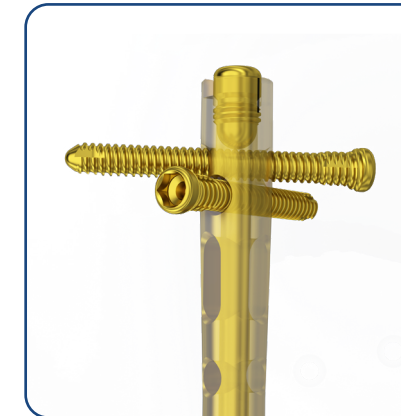


Molteplici opzioni per migliorare la stabilità

Bloccaggio statico e dinamico multidirezionale delle viti

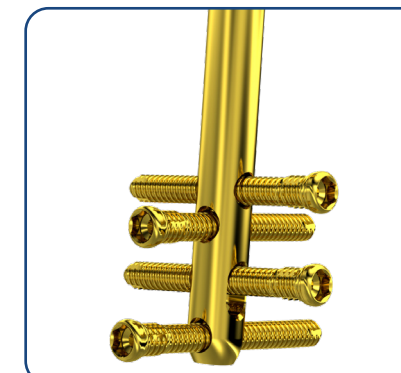

Foro a 2,3mm di distanza dall'estremità del chiodo

APPROCCIO RETROGRADO DI FEMORE

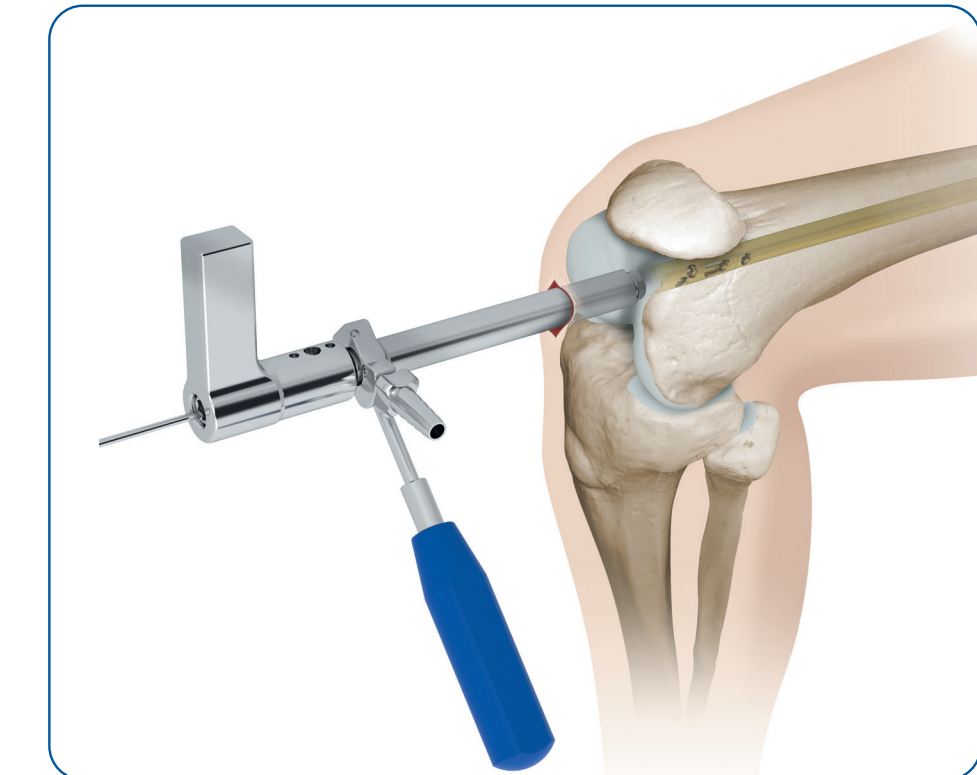

Molteplici opzioni di bloccaggio guidato


Bloccaggio distale multidirezionale

- 2 viti incrociate a 40°

- 2 viti parallele con accesso mediolaterale

Riduzione frammenti ossei

- 2 viti out-nail

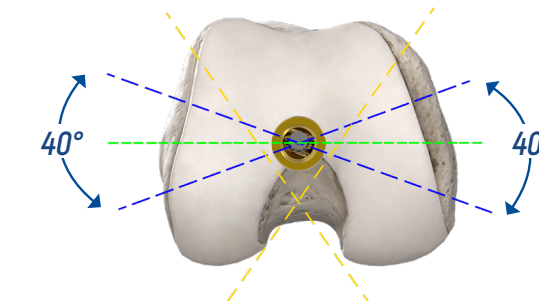

Viti condilari

